



Bionic Board Autonom Concept



www.beamyourlife.com

Email: info@beamyourlife.com

Tel: +49 (0)8024 82 63

Made in Germany

**Handbuch
Modell 2024**

Garantie

Die Garantie gilt für 2 Jahre nach dem Erwerb des Produktes bei privater Nutzung. Für die Garantieleistungen gelten die AGB.

Bewahren Sie die Rechnung, das Handbuch und die Garantie sorgfältig auf.

Verbraucherrechte

Erfüllungsort ist der Sitz des Herstellers bzw. Importeurs wie auf dem Handbuch angegeben. Wenn der Schaden durch einen Bedienfehler oder durch fehlerhafte Bedienung des Kunden oder durch Naturkatastrophen verursacht wurde, kann ein Service nur gegen eine zusätzliche Gebühr erbracht werden.

Speziell in folgenden Fällen wird der entstandene Aufwand in Rechnung gestellt:

- Für Schäden, die durch fehlerhafte Bedienung entstanden sind
- Bei Schäden, die dadurch entstanden sind, dass das Produkt in nicht empfohlenen Konditionen benutzt wurde
- Bei Schäden an Verschleißteilen
- Bei Schäden, die durch einen Schlag oder durch einen Fall des Produktes auf einen harten Gegenstand aufgetreten sind
- Bei Schäden durch Anschluss an den falschen Netzanschluss oder durch Überspannung
- Bei Schäden, die durch Nichtbefolgung des Handbuchs entstanden sind
- Lagern und benutzen Sie das Gerät nur in geschlossenen und trockenen Räumen
- Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder entzündlichen Gasen
- Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren, zu öffnen oder auseinander zu bauen

Vielen Dank, dass Sie sich für das Bionic Board entschieden haben.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, damit Sie die Vorteile des Produktes sicher und effektiv nutzen können.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie bei Bedarf später darin nachschlagen können.

Technische Daten

Spannung: AC 220 - 240 Volt, 50 Hz

Leistung: ca. 200 Watt

Gewicht: ca. 6,5 kg

L x B x H: 49 x 31 x 11 cm

Inhaltsverzeichnis

Gegenanzeige

Sicherheitshinweise

Bedienung

Garantie

Verbraucherrechte

Hinweis!

In dem seltenen Fall, dass das Gerät nach dem Einschalten nicht ordnungsgemäß funktioniert entfernen Sie bitte den Netzstecker für ca. 10 Sekunden aus der Steckdose und schalten danach das Gerät erneut an.

Benutzen Sie das Gerät nicht mehr als 15 Minuten im Dauerbetrieb um eine Überhitzung zu vermeiden!

Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen bevor Sie es erneut benutzen.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung während des Betriebes und decken Sie das Gerät nicht ab.

Gegenanzeige

Folgende Personengruppen sollten das Gerät nicht benutzen oder vor der Benutzung des Geräts einen Arzt konsultieren:

- Schwangere
- Personen mit (Infektions-)Krankheiten aller Art
- Personen mit elektronischem Schrittmacher aller Art

Dieses Gerät sollte nicht bei Brandwunden angewandt werden.

Sicherheitshinweise

Um die Gefahr von elektrischen Schocks zu vermeiden:

Ziehen Sie den Stecker des Netzgerätes immer sofort nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen aus der Steckdose.

Benutzen Sie das Gerät nicht in Temperaturen über 40 Grad Celsius.

Halten Sie das Gerät trocken. Nutzen Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.


Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es umgehend durch den Hersteller, einen Servicemitarbeiter oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden.

Das Gerät wurde für den häuslichen Gebrauch entwickelt und nicht für den kommerziellen Einsatz.

Um die Gefahr von Bränden, Feuer, elektrischen Schocks oder Verletzungen von Personen zu vermeiden, verbinden Sie das Gerät nur mit einer geeigneten Steckdose und dem mitgelieferten Netzgerät.

Wenn das Gerät von einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung gebracht wird, warten Sie mindestens 1 Stunde bevor Sie das Gerät benutzen und damit eine mögliche Kondensation in den elektronischen Teilen keinen Kurzschluss verursacht.

Bedienung

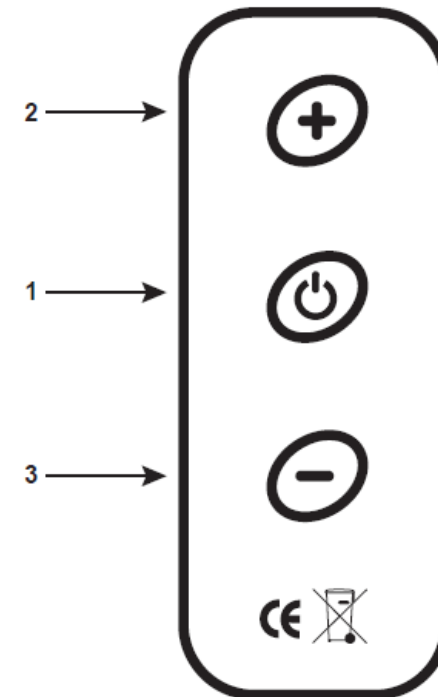

- 1 AN / AUS Schalter
- 2 "+" Intensität höher
- 3 "-" Intensität niedriger

Zum Starten drücken Sie die Taste 1 (AN / AUS). Mit den Tasten 2 und 3 können sie die Intensität in 5 Stufen regulieren.

Die Dauer des automatischen Programmes ist ca. 10 Minuten.

Für einen optimalen Mobilisationseffekt bewegen Sie bitte auch Ihre Füße horizontal und vertikal während der Anwendung.